



hallusana®


Motorisierte Bewegungsschiene

Nach Hallux valgus / rigidus OP

Operationsergebnis sicherstellen

- ✓ Vermeidung von Versteifungen
- ✓ Klinisch belegte
Rekonvaleszenzverkürzung

Connor et al. (1995): Motorisierte Bewegungsschienen verkürzen die Heilung um 10 Tage ggü. Physiotherapie allein.

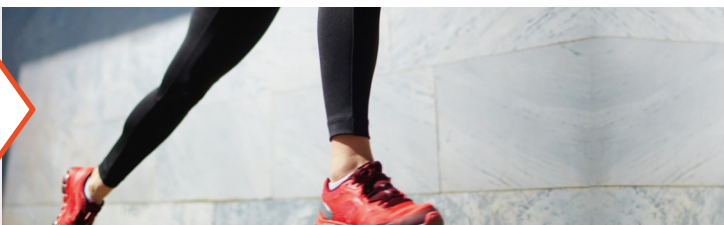

Nach der OP zählt jeder Tag

Nach Hallux-Operationen können ohne gezielte Mobilisation **Bewegungseinschränkungen** und **Gelenkversteifungen** drohen.

Schon eine kurze Zeit der Ruhigstellung kann zur **Verkürzungen der Gelenkinnenhaut** und damit **Versteifung** führen.

Akeson et al. (1987): Bereits eine Woche Ruhigstellung führt zu Verkürzung der Gelenkinnenhaut und Verwachsungen.



Fachlich
anerkannt



Klinisch
bestätigt



Therapeutisch
erprobt



Anwendung zu Hause

einfach - sicher - selbständig*

Dank des optimierten Designs kann die Hall-U-Sana® ohne Vorkenntnisse angewendet werden – bequem und sicher im eigenen Zuhause.

*nach ärztlicher Anweisung



Passive Mobilisierung
des Gelenks



Keine individuelle
Anpassung nötig



Erhältlich für linken und
rechten Fuß



Unterstützt die Wieder-
herstellung der Beweglichkeit

Sanfte Bewegung. Effektive Heilung.

Die motorisierte Bewegungsschiene Hall-U-Sana® mobilisiert den großen Zeh passiv und kontrolliert: für eine schnellere Genesung.

	Nach oben (dorsal) ↗ ↘	Nach unten (plantar) ↙ ↚
P 1	+ 20°	- 10°
P 2	+ 40°	- 20°

Zwei vordefinierte
Programme

25 Minuten
2x täglich



Hall-U-Sana® trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR)



HA-500-381-DE-V1