



hallusana®


Attelle de mobilisation

Après une chirurgie de l'hallux valgus/rigidus

Résultats postopératoires optimisés

- ✓ Prévention du raidissement
- ✓ Réduction du temps de convalescence cliniquement prouvée

Connor et al. (1995): les dispositifs de mobilisation passive continue permettent de réduire le délai de guérison de 10 jours par rapport à la physiothérapie seule.

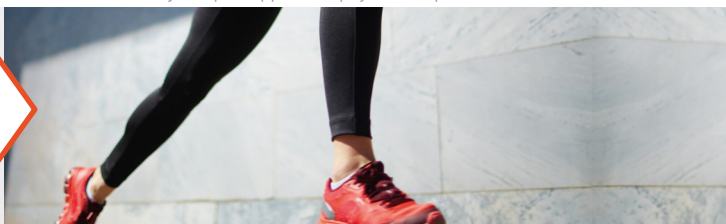

Après l'opération, chaque jour compte

Après une chirurgie de l'hallux, il existe un risque de **limitation de la mobilité** et de **raidissement des articulations** en l'absence de mobilisation ciblée.

Même une courte période d'immobilisation peut entraîner un **raccourcissement de la membrane synoviale** et, par conséquent, une **raideur**.

Akeson et al. (1987): une seule semaine d'immobilisation entraîne un raccourcissement de la membrane synoviale et la formation d'adhérences.



Reconnu par les
professionnels de santé



Cliniquement
validé



Thérapeutiquement
prouvé



Utilisez-le à domicile

facile à utiliser - sûr - en toute autonomie*

Grâce à son design optimisé, le Hall-U-Sana® peut être utilisé sans expérience préalable - confortablement et en toute sécurité à domicile.

*conformément aux instructions du médecin



Mobilisation passive de l'articulation



Disponible pour le pied gauche et le pied droit



Aucun réglage individuel nécessaire



Favorise le retour de la mobilité

Mobilisation progressive. Récupération efficace.

L'attelle de mobilisation Hall-U-Sana® mobilise le gros orteil de manière passive et contrôlée - pour une récupération plus rapide.

	Vers le haut (dorsal) ↑ ↗	Vers le bas (plantar) ↓ ↘
P 1	+ 20°	- 10°
P 2	+ 40°	- 20°

Deux programmes
prédéfinis

25 minutes
2 fois par jour



Hall-U-Sana® porte le marquage CE et répond aux exigences du règlement (UE) 2017/745 (MDR)



HA-500-382-FR-V1